


Orbis

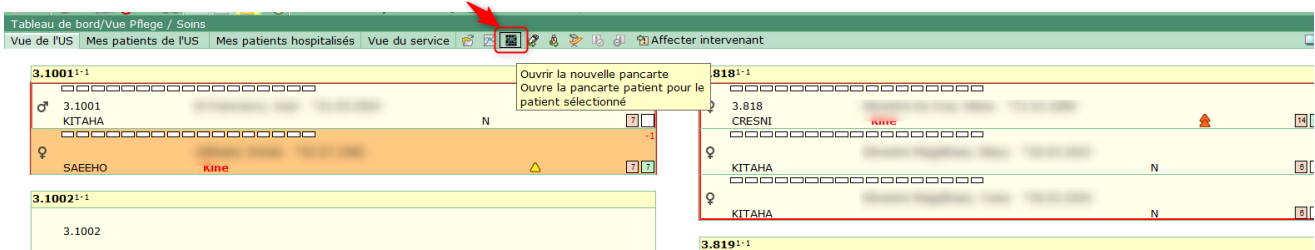
La nouvelle Pancarte

Contents



1.	Accès et design de la Pancarte	2
2.	Généralités de navigation et logique d'affichage.....	4
2.1	Généralités de navigation	4
2.2	Logique d'affichage.....	5
3.	Icônes/fonctionnalités de la barre horizontale.....	6
3.1	Vue Pancarte	6
3.2	Historique des séjours.....	6
3.3	Sélection d'une date précise.....	7
3.4	Signification des icônes.....	8
4.	Création de formulaires	8
4.1	Créer/ouvrir un formulaire.....	8
4.2	Précisions.....	9
5.	Documentation des Diagrammes de soins.....	10
6.	Documentation particulière.....	11
6.1	Les drainages avec E/S.....	11
6.2	Prise de tensions simultanée droite/gauche	12
7.	Validation des prescriptions et actions de soins	14
8.	Lecture des données de la Pancarte.....	15

1. Accès et design de la Pancarte

- A partir du Tableau, accès via l'icône  (le raccourci « Enter » ne fonctionne que pour l'ancienne Pancarte)




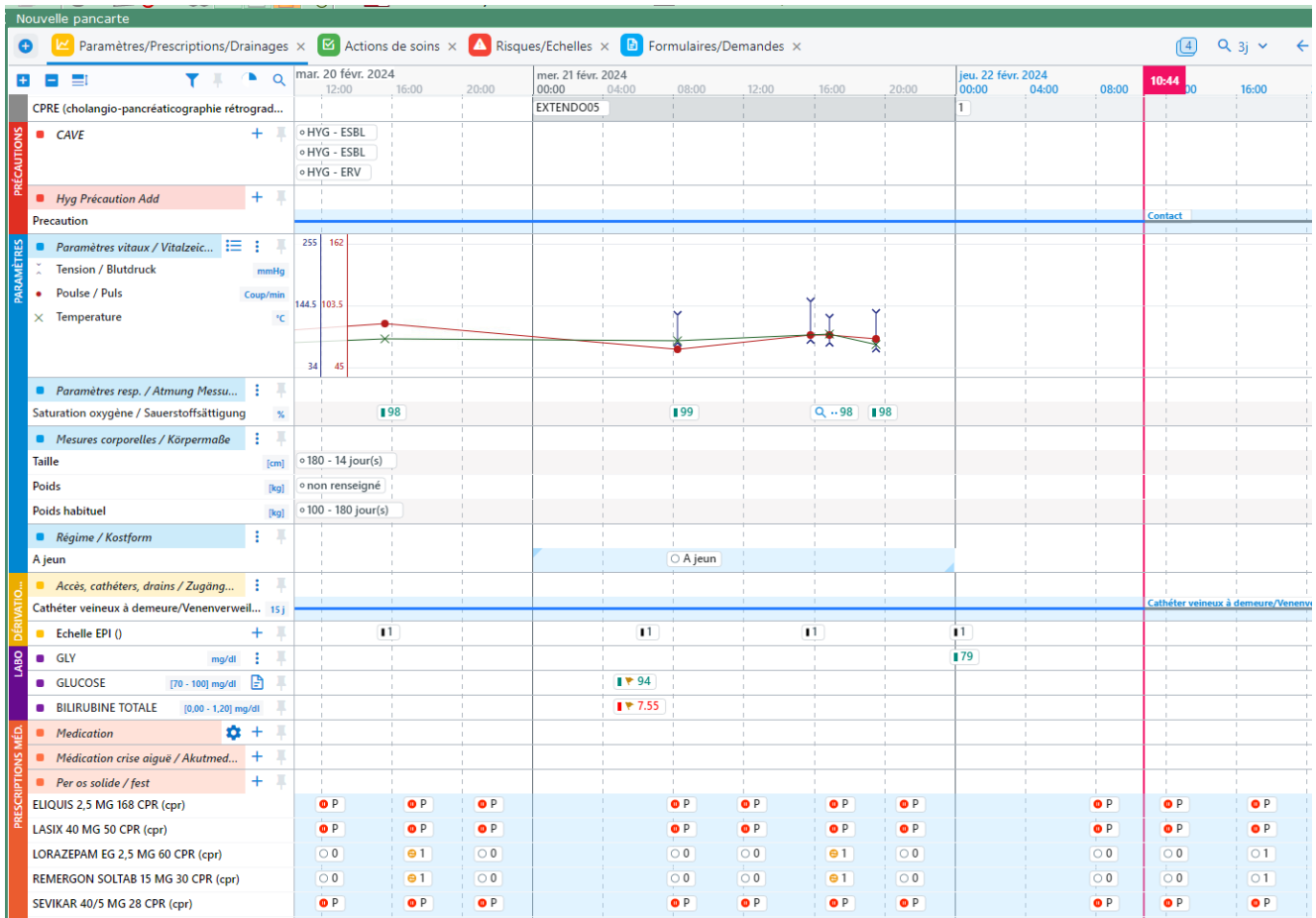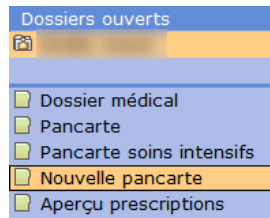- A partir du menu patient, via l'icône « Nouvelle Pancarte ».




Précision : il est possible d'activer une ouverture automatique sur la nouvelle pancarte par une configuration à faire vous-mêmes : cliquer droit sur l'onglet « Nouvelle Pancarte » du dossier patient et sélectionner « Définir Nouvelle pancarte comme élément actif ».

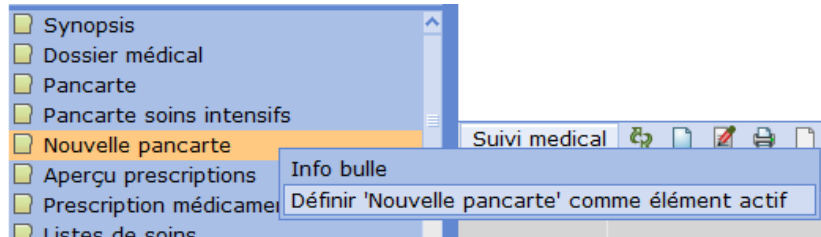Ainsi, lorsque vous faites un double clic sur le patient sélectionné dans le Tableau de bord → le dossier s'ouvrira automatiquement sur la nouvelle Pancarte.




Principe / ce qui change ?

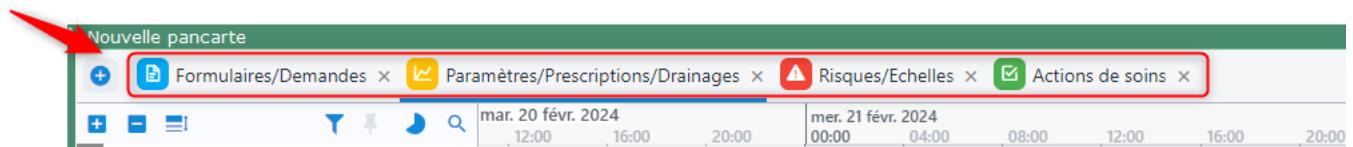- Organisation par onglets




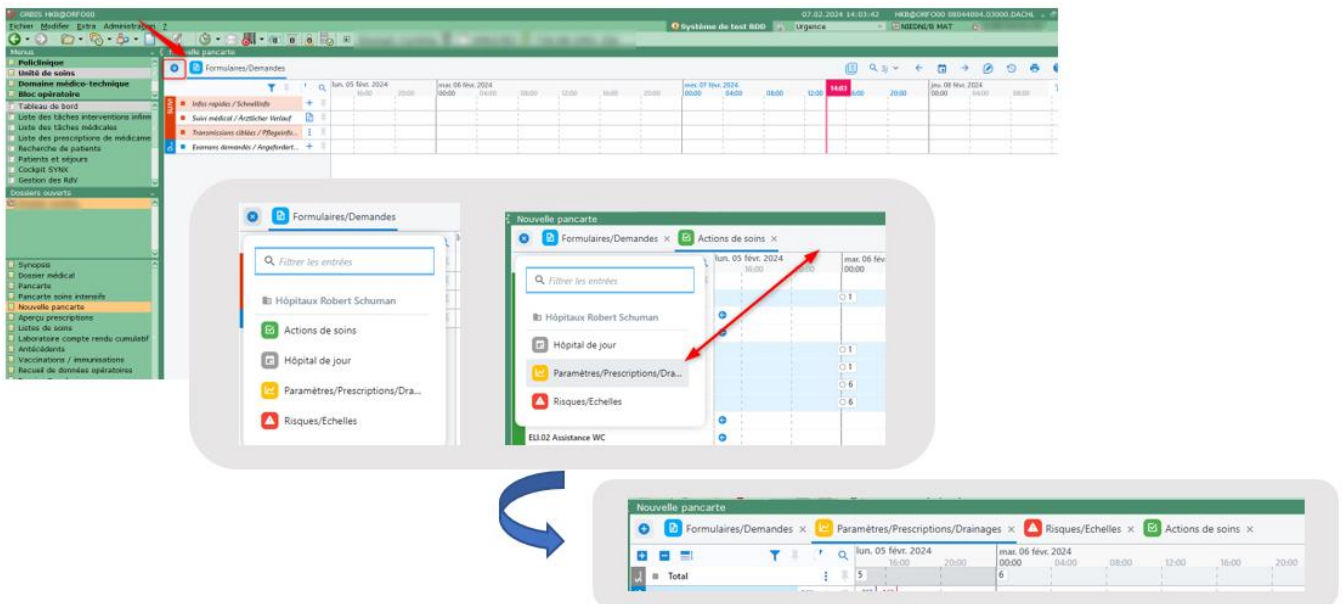A la première connexion , un seul onglet est présent → il est nécessaire de les activer (une seule fois) via le « + ».





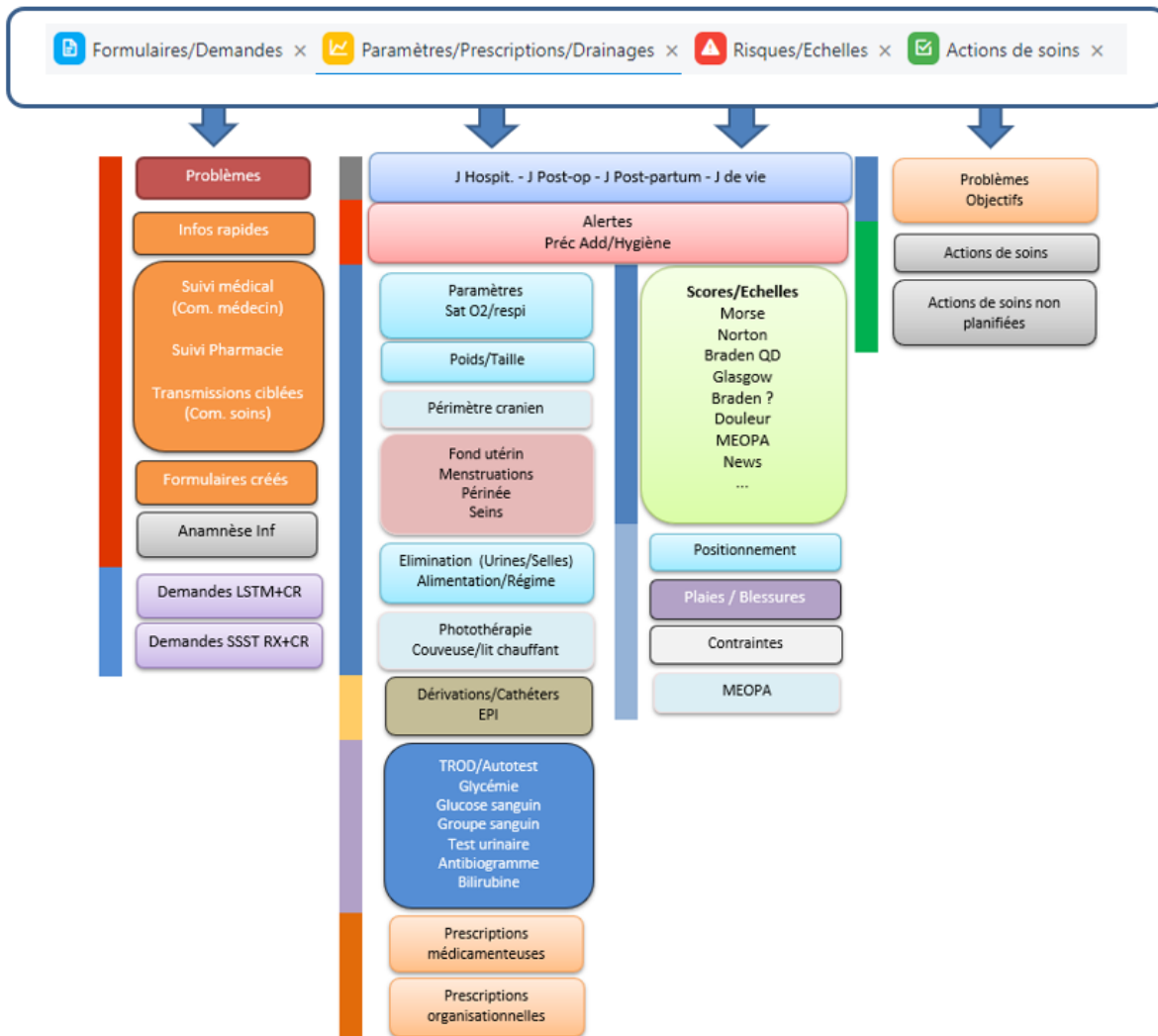Il est possible de changer leur ordre en maintenant le clic gauche sur l'onglet tout en le bougeant à l'endroit souhaité

Leur contenu :



2. Généralités de navigation et logique d'affichage

2.1 Généralités de navigation

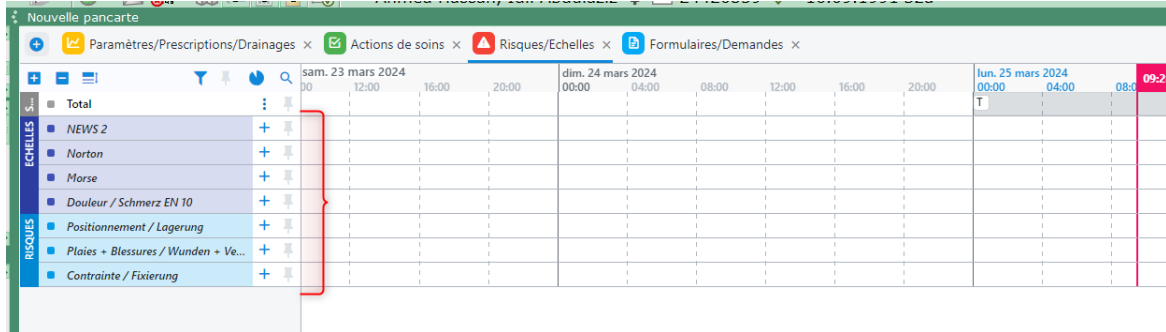
- Avancer / reculer dans la Pancarte -> cliquer sur le fond et maintenir le clic de la souris vers la droite ou la gauche selon le souhait (« drag and drop »)
- Zoomer / Dé zoomer -> Touche Ctrl + molette de la souris ou utiliser l'icône  3j  (cf 3.1)

2.2 Logique d'affichage


- Affichage par défaut


Un minimum d'items est visible par défaut afin de ne pas alourdir la pancarte de lignes vides.

Ci-dessous un exemple dans l'onglet Risques/Echelles ; nous y retrouvons les formulaires fréquemment utilisés.



- Affichage des lignes vides

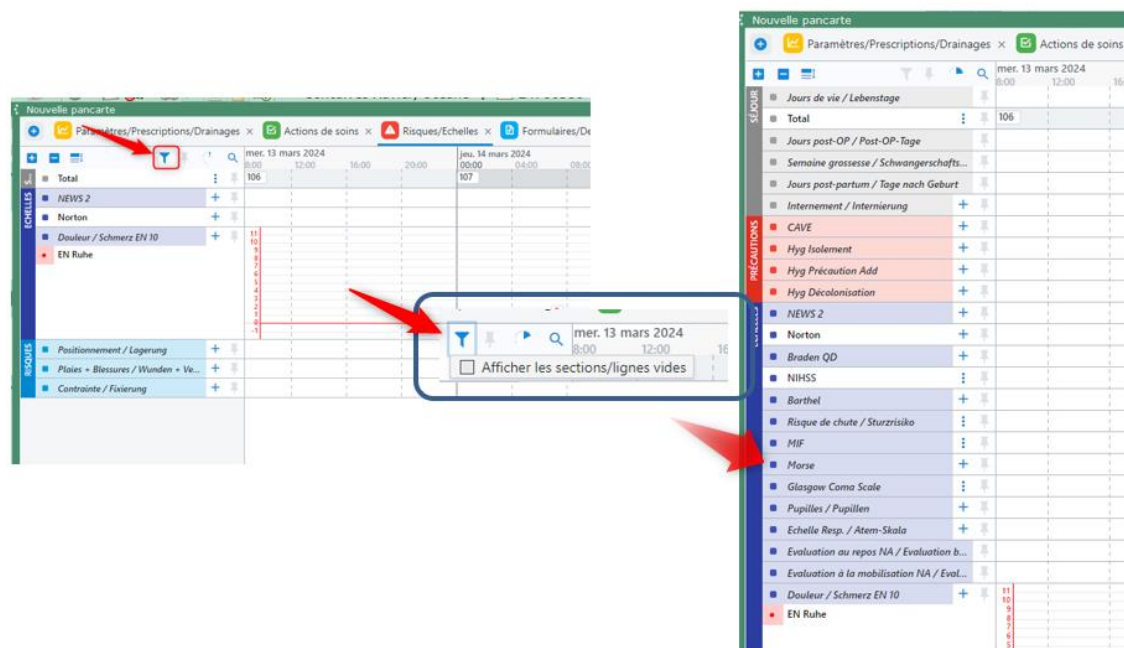Si vous souhaitez visualiser les autres lignes/formulaires présents dans l'onglet, par exemple, pour créer un nouveau formulaire -> cliquer sur l'icône  et ensuite cocher la case « Afficher les sections/lignes vides »




3. Icônes/fonctionnalités de la barre horizontale




3.1 Vue Pancarte

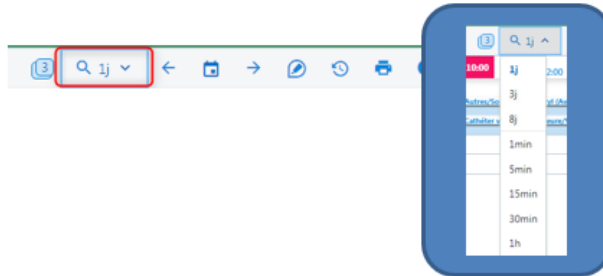La vue est par défaut sur 3 jours mais il est possible de la changer via :




3.2 Historique des séjours

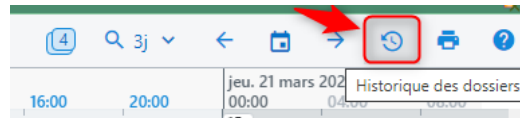Vue de l'historique du séjour en cours ainsi que des anciens séjours et passages.



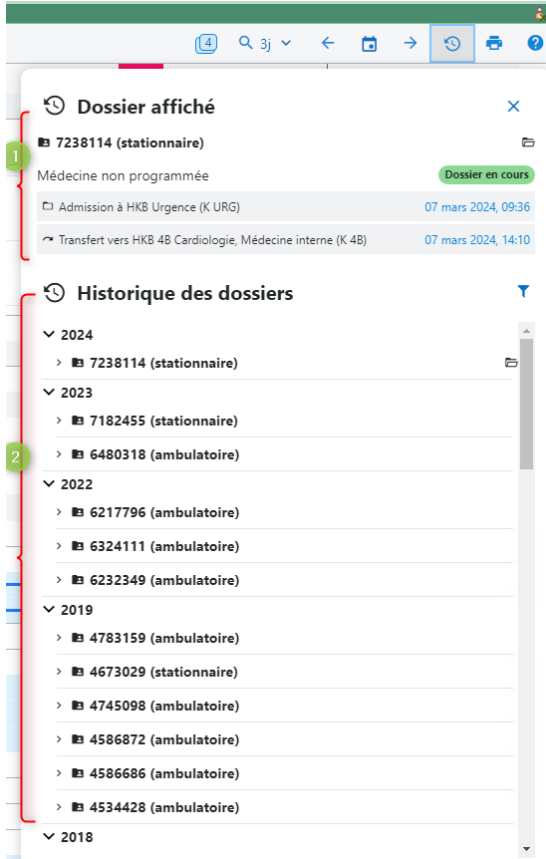Cette fonctionnalité permet la navigation directe à des dates souhaitées, par exemple, au jour de l'admission ou épisodes d'autres séjours / passages.



1) Historique du séjour en cours

Admission à HKB Urgence (K URG) 07 mars 2024, 09:36

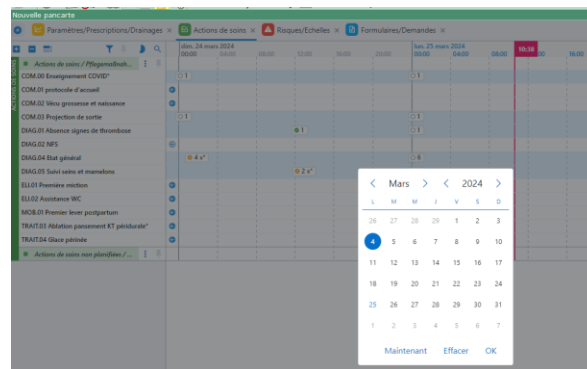
Cliquer sur l'évènement pour accéder directement à cette date

2) Historique des autres séjours ou passage


3.3 Sélection d'une date précise



Choix de la date dans le calendrier et cliquer sur OK





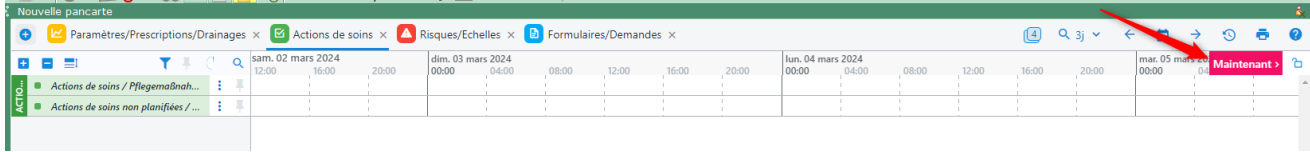Pour revenir au jour actuel, cliquer sur **Maintenant >**



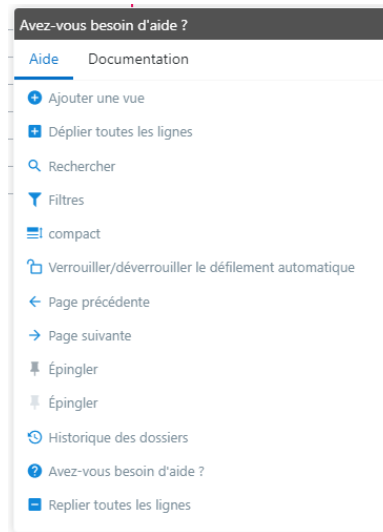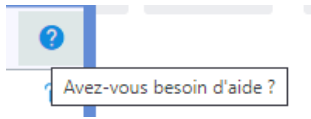3.4 Signification des icônes



Si vous avez un doute sur la fonctionnalité d'une icône, l'information est visible via 

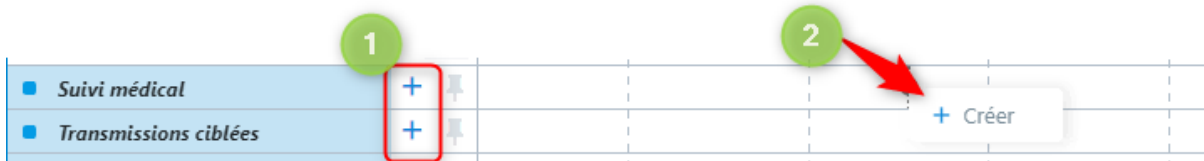


4. Création de formulaires

4.1 Créer/ouvrir un formulaire

Deux options à partir de la Pancarte :



1. soit en cliquant directement sur le  présent à côté du formulaire
2. soit par clic droit dans la ligne pour appeler le  et ensuite clic gauche pour ouvrir le formulaire.




Il est aussi toujours possible d'aller le chercher via le menu  « Création d'un nouveau document ».


4.2 Précisions

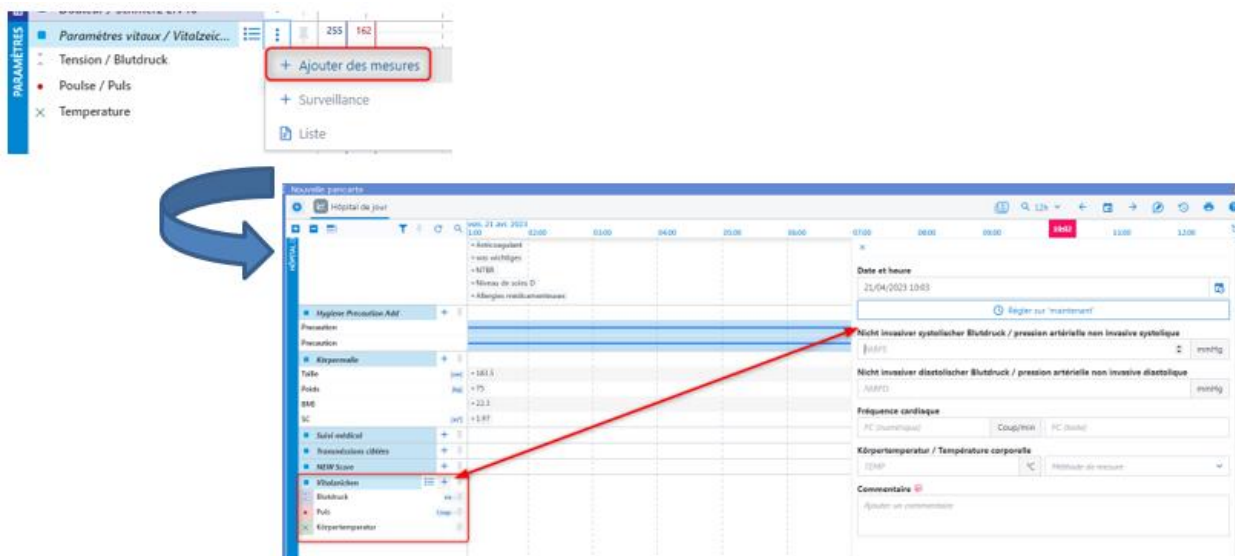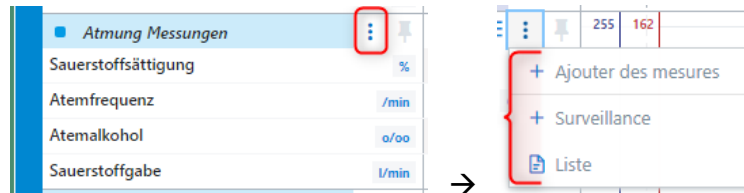
- 1) pour les paramètres et autres formulaires avec , cela signifie qu'il y a plus qu'une fonctionnalité derrière



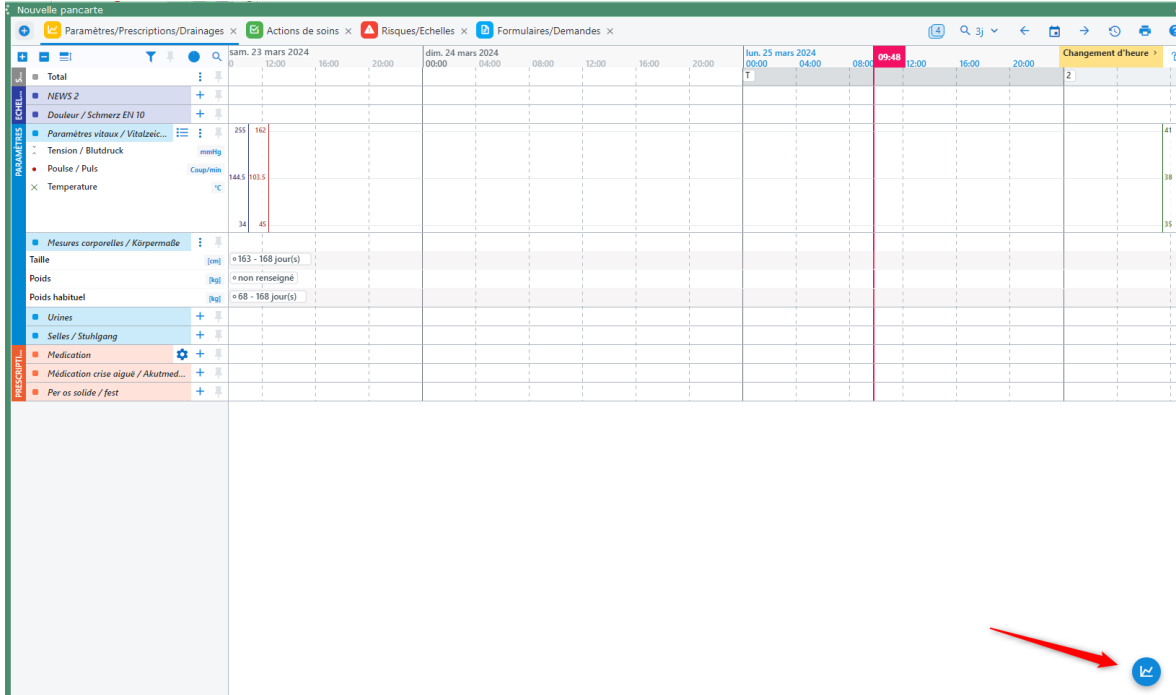
Pour les paramètres, il est également possible d'appeler directement le formulaire incluant l'ensemble des paramètres via l'icône  en bas à droite de l'écran.




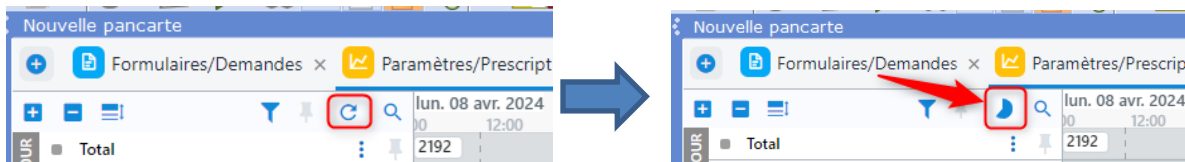2) Si les données/formulaires ne sont pas visibles de suite dans la Pancarte, c'est que le refresh est en cours. Il est possible de l'accélérer en cliquant sur le 



5. Documentation des Diagrammes de soins

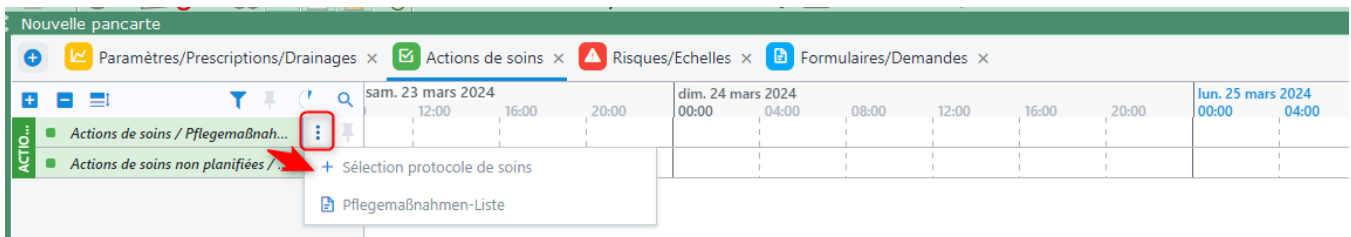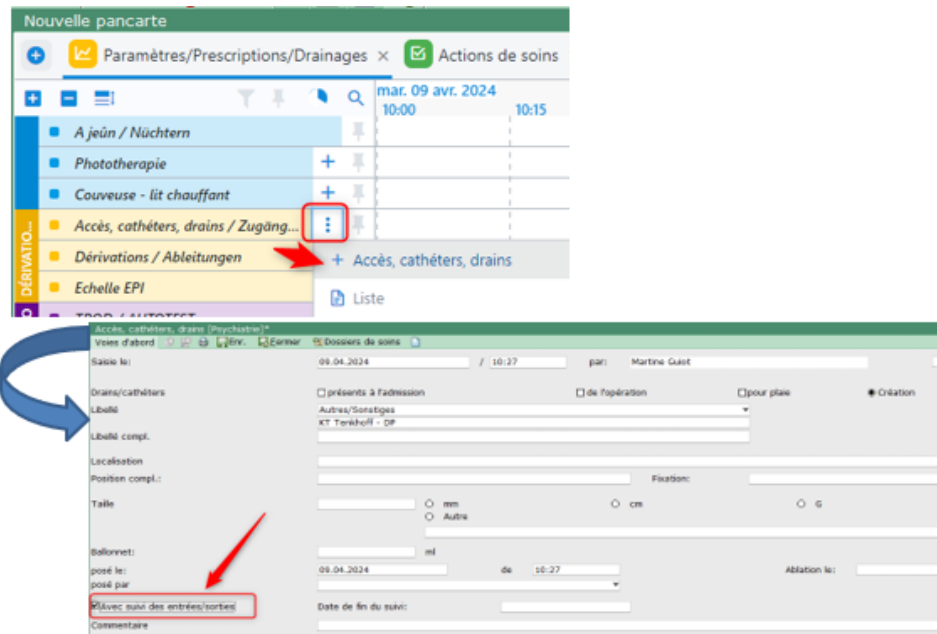
Dans l'onglet « Actions de soins », sélection d'un diagramme de soins ou d'une action de soins unique via ,




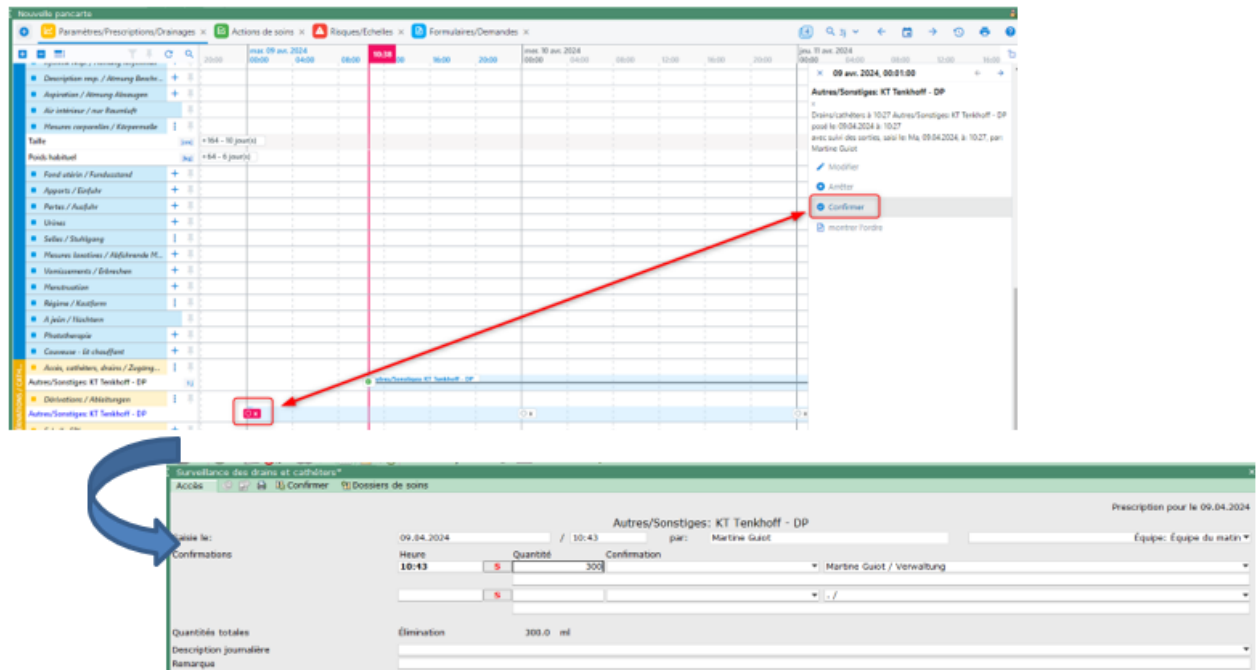
6. Documentation particulière

6.1 Les drainages avec E/S

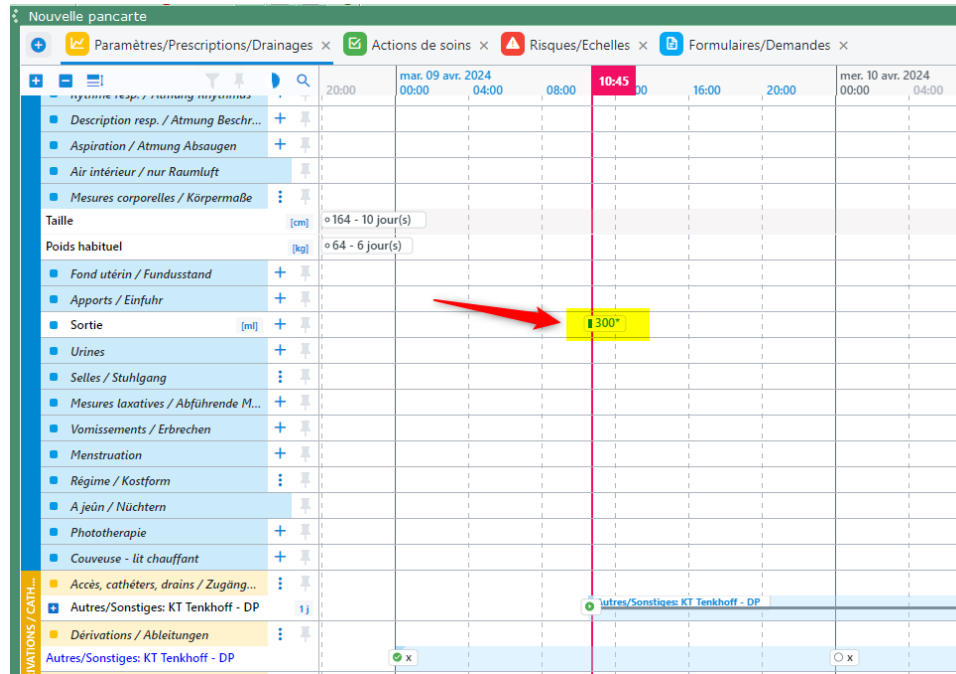
- Documenter les champs drains/cathéters ET cocher « Avec suivi des entrées/sorties »




- Pour documenter les E/S, cliquer sur le  pour ouvrir le formulaire via « confirmer »



- Vue Pancarte





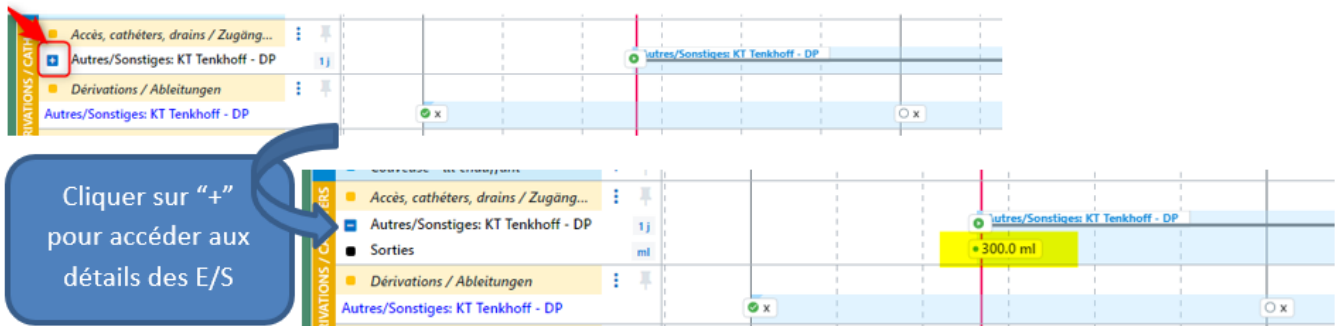
- La visualisation est directement accessible au niveau du drainage si vous cliquez sur 




6.2 Prise de tensions simultanée droite/gauche

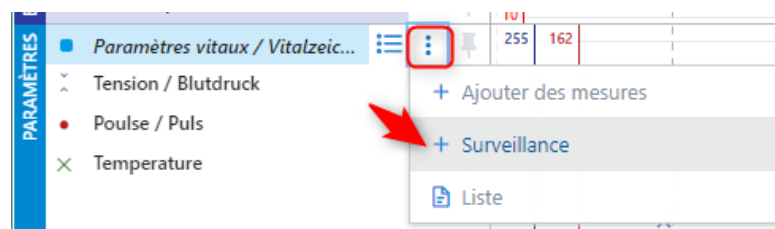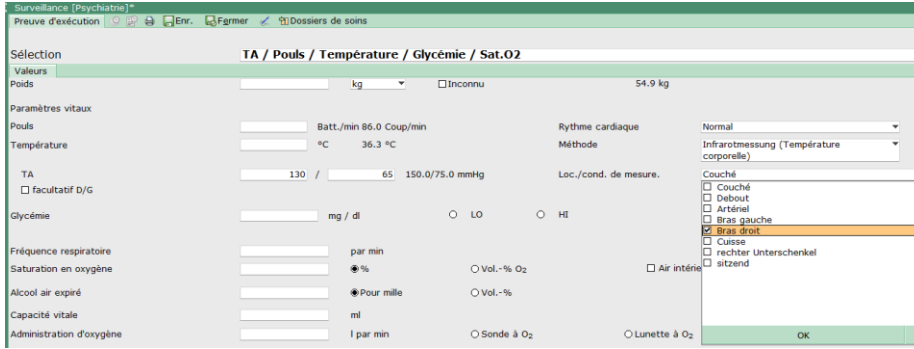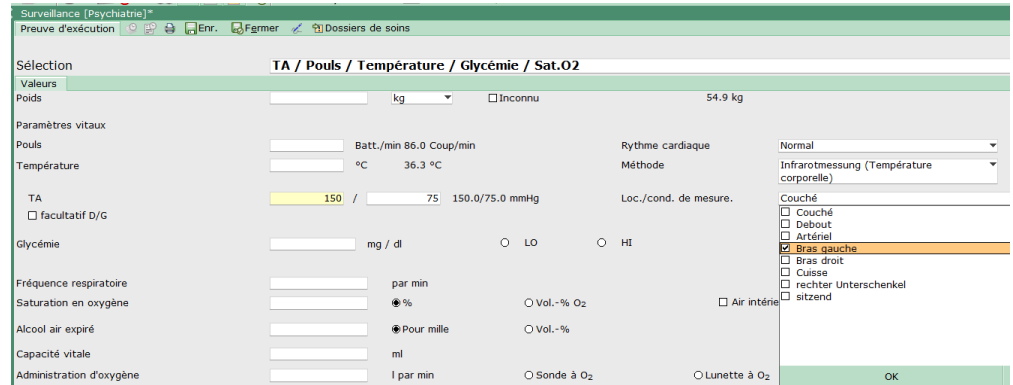- Option 1, encodage des tensions sur 2 formulaires différents via « Surveillance »




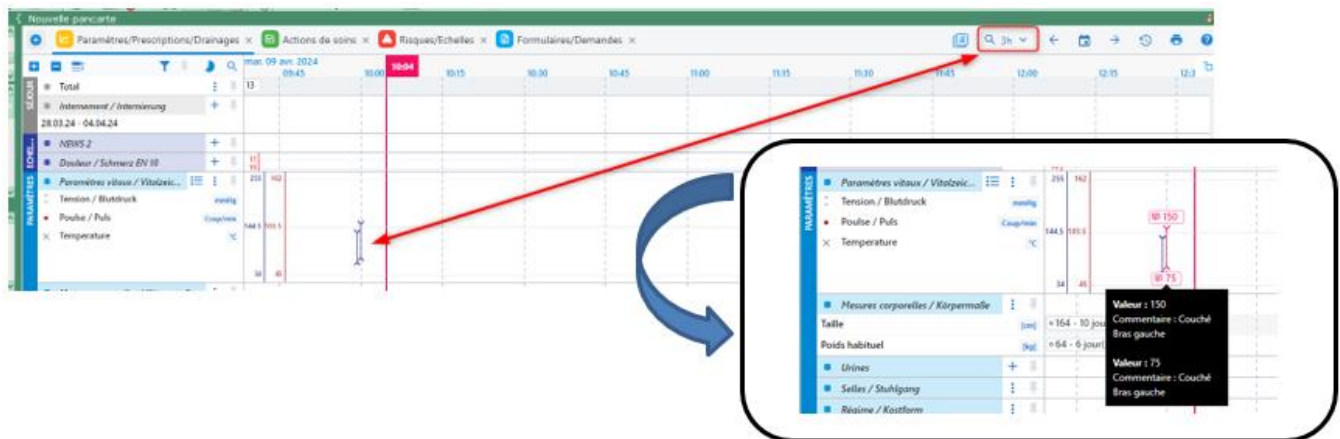
Sélectionner le niveau de zoom approprié pour une visualisation correcte



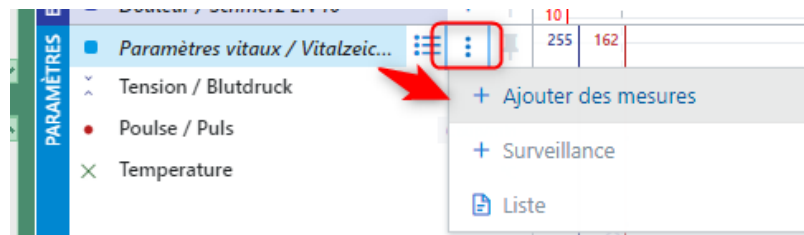
- Option 2, encodage des tensions sur 2 formulaires différents via « Ajouter des mesures »



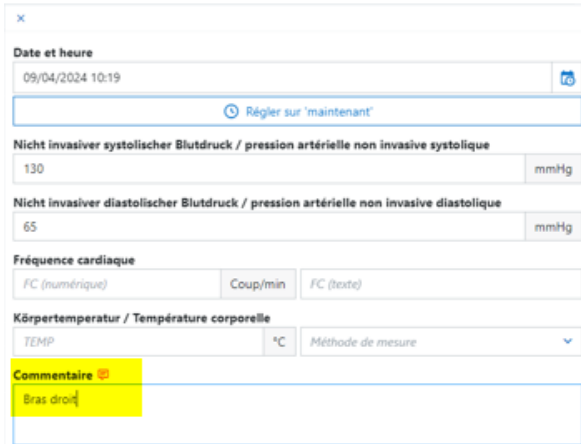Noter la localisation en texte libre dans le champ « commentaire ».




Date et heure: 09/04/2024 10:19
 Régler sur 'maintenant'
 Nicht invasiver systolischer Blutdruck / pression artérielle non invasive systolique: 130 mmHg
 Nicht invasiver diastolischer Blutdruck / pression artérielle non invasive diastolique: 65 mmHg
 Fréquence cardiaque: FC (numérique) Coup/min FC (texte)
 Körpertemperatur / Température corporelle: TEMP °C Méthode de mesure
 Commentaire: Bras droit

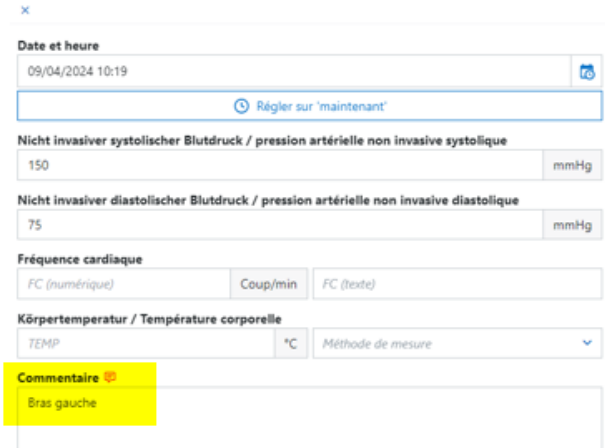


Date et heure: 09/04/2024 10:19
 Régler sur 'maintenant'
 Nicht invasiver systolischer Blutdruck / pression artérielle non invasive systolique: 150 mmHg
 Nicht invasiver diastolischer Blutdruck / pression artérielle non invasive diastolique: 75 mmHg
 Fréquence cardiaque: FC (numérique) Coup/min FC (texte)
 Körpertemperatur / Température corporelle: TEMP °C Méthode de mesure
 Commentaire: Bras gauche

Ensuite sélectionner le niveau de zoom approprié pour une visualisation correcte.

7. Validation des prescriptions et actions de soins

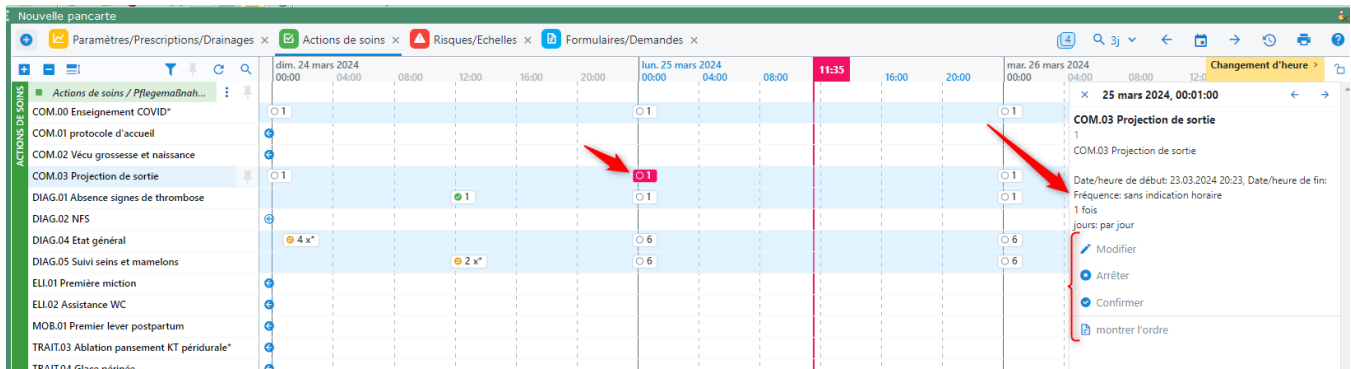
- Soit par clic gauche sur le , qui ouvre une fenêtre avec les informations détaillées sur la droite de l'écran



Nouvelle pancarte: Paramètres/Prescriptions/Drainages x Actions de soins x Risques/Echelles x Formulaires/Demandes x
 dim. 24 mars 2024 00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 jun. 25 mars 2024 00:00 04:00 08:00 11:35 16:00 20:00 mar. 26 mars 2024 00:00 04:00 08:00 12:00 Changement d'heure
 Actions de soins / Pflegemaßnah...
 COM.00 Enseignement COVID*
 COM.01 protocole d'accueil
 COM.02 Vécu grossesse et naissance
 COM.03 Projection de sortie
 DIAG.01 Absence signes de thrombose
 DIAG.02 NFS
 DIAG.04 Etat général
 DIAG.05 Suivi seins et mamelons
 ELL.01 Première miction
 ELL.02 Assistance WC
 MOB.01 Premier lever postpartum
 TRAIT.03 Ablation pansement KT périurale*
 TRAIT.04 Glucose urinaire

25 mars 2024, 00:01:00
 COM.03 Projection de sortie
 1
 COM.03 Projection de sortie
 Date/heure de début: 23.03.2024 20:23, Date/heure de fin:
 Fréquence: sans indication horaire
 1 fois
 jours: par jour
 Modifier
 Arrêter
 Confirmer
 montrer l'ordre

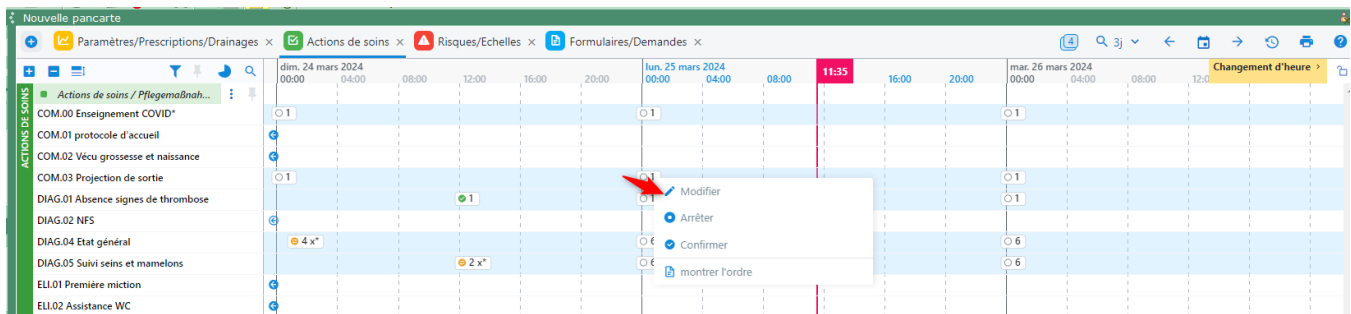- Soit par clic droit sur le , sans la présence des détails




Nouvelle pancarte: Paramètres/Prescriptions/Drainages x Actions de soins x Risques/Echelles x Formulaires/Demandes x
 dim. 24 mars 2024 00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 jun. 25 mars 2024 00:00 04:00 08:00 11:35 16:00 20:00 mar. 26 mars 2024 00:00 04:00 08:00 12:00 Changement d'heure
 Actions de soins / Pflegemaßnah...
 COM.00 Enseignement COVID*
 COM.01 protocole d'accueil
 COM.02 Vécu grossesse et naissance
 COM.03 Projection de sortie
 DIAG.01 Absence signes de thrombose
 DIAG.02 NFS
 DIAG.04 Etat général
 DIAG.05 Suivi seins et mamelons
 ELL.01 Première miction
 ELL.02 Assistance WC

Modifier
 Arrêter
 Confirmer
 montrer l'ordre


8. Lecture des données de la Pancarte

Pour visualiser certains détails d'un formulaire :

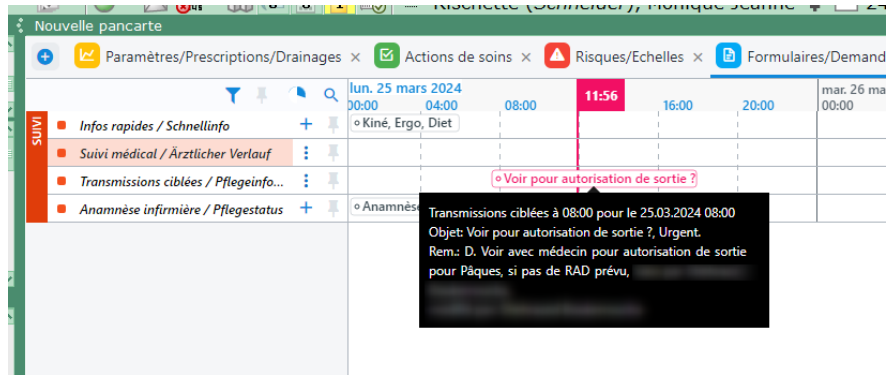- Soit passer la souris sur le titre du formulaire



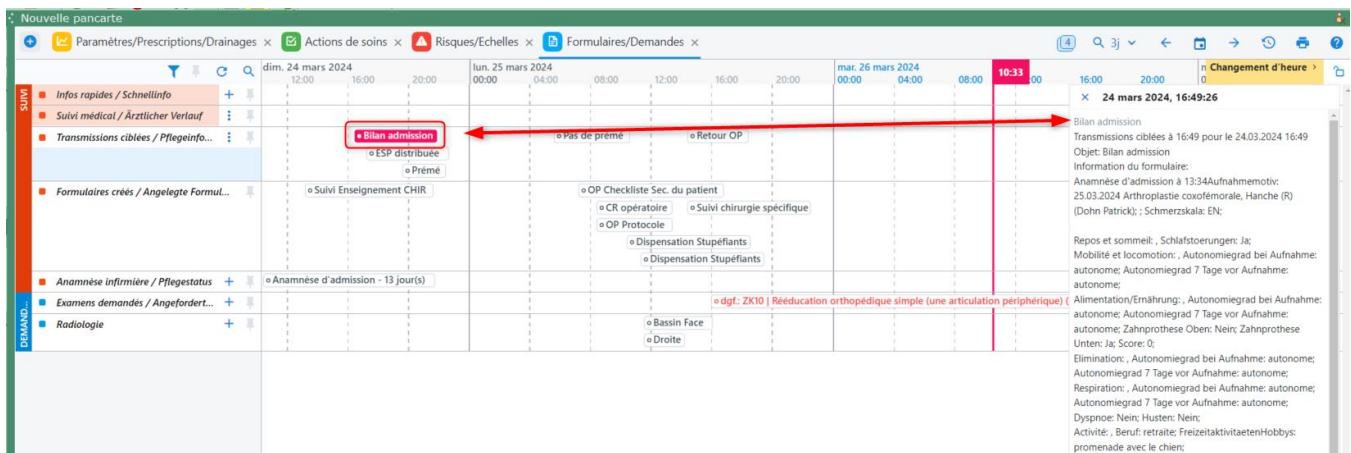- Soit cliquer gauche sur le titre du formulaire qui ouvre une fenêtre sur la droite de l'écran



- Soit cliquer droit sur le titre du formulaire donnant accès à l'ouverture du formulaire en lui-même

